

**SCR2795 – ASTA PORTAFLEBO 4 GANCI – I.V. STAND 4 HOOKS**  
**SCR2795/P – ASTA PORTAFLEBO 2 GANCI – I.V. STAND 2 HOOKS**  
**SCR2795/A – ASTA PORTAFLEBO ALLUMINIO 2 GANCI – I.V. STAND**  
**ALLUMINIUM 2 HOOKS**



SCROSATI ARREDAMENTI METALLICI SRL

SCR2795 – SCR2795/P – SCR2795/A



**MANUALE D'USO – ISTRUZIONI E MONTAGGIO**  
**USER MANUAL – ASSEMBLY INSTRUCTIONS**



**ATTENZIONE!** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

**DESCRIZIONE**

Asta porta flebo telescopica a 2/ 4 ganci per il sostegno di sacche ed infusioni intravenose destinate al paziente.

Costituita da due tubolari coassiali in acciaio cromato o alluminio. Tubolare superiore regolabile in altezza fino 210 cm tramite manopola in plastica. Dotata di base in plastica nera a 5 ruote Ø 50 mm.

Il dispositivo è un ausilio per la cura del paziente allettato o con limiti nell'autonomia funzionale.

**COMPONENTI:**

- N.1 Tubolare sezione 25x1 L.980 mm
- N.1 Tubolare sezione 20x1 L.1480 mm
- N.1 manopola di regolazione in plastica
- N.1 supporto per cestello flebo
- N.1 base in plastica nera a 5 raggi su ruote

**Sacchetto con materiale di montaggio:**

Cod. SCR2795/P	Cod. SCR2795/A	Cod. SCR2795
<ul style="list-style-type: none"> <li>- N. 1 supporto per cestello flebo in plastica a 2 ganci</li> <li>- N. 5 ruote Ø 50 mm</li> <li>- N.1 vite a farfalla M6x30</li> <li>- Tappo nero per base</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N. 1 supporto per cestello flebo in plastica a 2 ganci</li> <li>- N. 5 ruote Ø 50 mm</li> <li>- N.1 vite a farfalla M6x30</li> <li>- Tappo nero per base</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N. 1 supporto per cestello flebo in acciaio cromato a 4 ganci</li> <li>- N. 5 ruote Ø 50 mm</li> <li>- N.1 vite a farfalla M6x30</li> <li>- Tappo nero per base</li> </ul>

**SCR2795/P - SCR2795/A**



**SCR2795**



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Prendere le ruote e inserirle ad incastro nella base.
2. Prendere il tubolare con sezione maggiore (25x1.2) dotata di manopola ed inserirlo prima nel tappo nero, successivamente nella base e fissare le parti tramite vite a farfalla nella zona sottostante la base.
3. Prendere il tubolare con sezione 20x1 inserirlo all'interno di quello inferiore e fermarlo all'altezza desiderata tramite la manopola di regolazione.
4. Per i modelli SCR2795/P - SCR2795/A prendere il supporto in plastica a 2 ganci e facendo pressione inserirlo all'estremità superiore del tubolare. In caso di necessità usare un martello morbido per inserirlo fino a fine in fondo.
5. Per il Cod. SCR2795 fissare il supporto a 4 ganci tramite la rotella in dotazione.

## SCHEMA TECNICA

	<b>SCR2795</b>	<b>SCR2795/P</b>	<b>SCR2795/A</b>
<b>Misure</b>	Asta H regolabile 160-210 cm	Asta H regolabile 160-210 cm	Asta H regolabile 165-210 cm
<b>Peso totale</b>	3,150 kg	2,900 kg	2,080 kg
<b>Portata massima</b>	Gancio in acciaio <b>2 kg</b> / ognuno	Gancio in plastica <b>5 kg</b> / ognuno	Gancio in plastica <b>5 kg</b> / ognuno

## AVVERTENZE D'USO

- **Fissare bene tramite la viteria in dotazione.**
- **Verificare che i dadi del bloccaggio siano ben stretti.**
- **Assicurarsi che le parti ad incastri siano bloccati nei propri alloggiamenti.**
- **Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.**
- **Evitare il contatto diretto con ferite aperte.**
- **Non adatto all'uso in ambienti aperti.**

## MANUTENZIONE E PULIZIA

- Utilizzare solo ricambi originali.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.
- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.
- Lavare le superfici in acciaio inox con acqua saponata ed usare disinfettanti appositi.
- Risciacquare con un panno bagnato ed asciugare con cura.
- Non versare sulle superfici detergenti a base di cloro o ammoniaca, sostanze grasse ed oleose.
- Non usare per la pulizia utensili contenenti ferro. Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.

## GARANZIA

- Il prodotto è garantito un anno per difetti di materiale e di lavorazione, ad esclusione delle parti di consumo.
- Manomissioni o danni causati da un errato utilizzo del prodotto comportano la decadenza immediata della garanzia.
- Il presente dispositivo medico è stato creato esclusivamente per le modalità sopra citate. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio.
- Non si risponde di danni a persone e cose dovuti a utilizzo improprio del presidio.

**ATTENTION!** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

**DESCRIPTION**

Telescopic I.V. stand with 2/4 hooks for the support of bags and infusions.  
 Composed of two coaxial tubes in chromed or aluminum steel. Tubular adjustable up to 210 mm by plastic regulation crank. Equipped with black plastic base with 5 wheels Ø 50 mm.  
 The device is an aid for the care of the patient who is bedded or with limits functional autonomy.

**COMPONENTS:**

- N.1 Tubular section 25x1 L.980 mm
- N.1 Tubular section 20x1 L.1480 mm
- N.1 Plastic regulation crank
- N.1 Staff phlebo
- N.1 Black plastic base with 5 spokes on wheels.

**Assembly material:**

SCR2795/P – SCR2795/A Codes	SCR2795/P – SCR2795/A Codes	SCR2795 Code
<ul style="list-style-type: none"> <li>- N. 1 Phleboclysis case in plastic with 2 hooks</li> <li>- N. 5 wheels Ø 50 mm</li> <li>- N.1 M6x30 Butterfly screw</li> <li>- Black cape for base</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N. 1 Phleboclysis case in plastic with 2 hooks</li> <li>- N. 5 wheels Ø 50 mm</li> <li>- N.1 M6x30 Butterfly screw</li> <li>- Black cape for base</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 Phleboclysis case in chromed steel with 4 hooks</li> <li>- N. 5 wheels Ø 50 mm</li> <li>- N.1 M6x30 Butterfly screw</li> <li>- Black cape for base</li> </ul>

**SCR2795/P - SCR2795/A**



**SCR2795**



## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Take the wheels and insert them into the base.
2. Take the tubular with a larger section (25x1.2) equipped with a knob, insert it first into the black cap, then into the base, fix the parts, and screw it into the area below.
3. Take the tubular section with 20x1 and insert the tube inside the other until it stops using the plastic regulation crank.
4. For SCR2795/P-SCR2795/A codes, take the plastic support with two hooks and press to insert the cap at the end of the tubular. If necessary, use a soft hammer to insert it all completely.
5. For SCR2795 code, fix the support with four hooks by knob supplied.

## TECHNICAL DATA

	<b>SCR2795</b>	<b>SCR2795/P</b>	<b>SCR2795/A</b>
<b>Measurement</b>	Adjustable H 160-210 cm	Adjustable H 160-210 cm	Adjustable H 165-210 cm
<b>Weight</b>	3,150 kg	2,900 kg	2,080 kg
<b>Max capacity</b>	Steel hook, <b>2 kg</b> / each	Steel hook, <b>5 kg</b> / each	Plastic hook, <b>5 kg</b> / each

## WARNINGS!

- **Fix well with the supplied screws.**
- **Check the locking nuts are tightened.**
- **Make sure that the parts are locked in their housing.**
- **Observe the maximum flow rates indicated in the data sheets.**
- **Avoid direct contact with open wounds.**
- **Not for use in open environments.**

## MAINTENANCE AND CLEANING


- Use only original spare parts.
- Periodically check all fixing points.
- To preserve at best, it is recommended to avoid prolonged exposure to sunlight, to contact and deposit in saline and very humid environments.
- Wash the stainless-steel surfaces with soapy water and use appropriate disinfectants.
- Rinse with a damp cloth and dry thoroughly.
- Do not spill on the surface cleaners containing chlorine or ammonia, fatty and oily substances.
- Do not use cleaning utensils containing iron. If necessary disinfection only use suitable non-corrosive products.

## WARRANTY

- The product is guaranteed for ONE YEAR for defects in materials and workmanship, excluding consumables.
- Tampering or damage caused by improper use of the product implies the immediate loss of guarantee.
- This medical device was created exclusively for the above-mentioned methods. Any other use is to be considered improper.
- We cannot be held liable for damages to persons or things due to improper use of the garrison.

Per informazioni ed assistenza tecnica contattare il produttore:

Please contact the manufacturer for information and technical assistance:

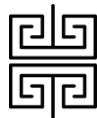

**Scrosati arredamenti metallici s.r.l.**

Arredamenti e Lavorazioni di tubo e lamiera  
Via Vittorio Veneto 95 - 21015 Lonate Pozzolo (VA)

TEL. 0331668615 - FAX 0331301120

Partita iva e C.F.: 02223730124

Sito web [www.scrosati.com](http://www.scrosati.com)

e-mail [scrosati@scrosati.com](mailto:scrosati@scrosati.com)

#### LEGENDA – SYMBOLS



Conservare in luogo fresco ed asciutto

Keep in a cool, dry place



Non esporre ai raggi solari

Keep away from sunlight



Consultare le istruzioni per l'uso

Please read instructions carefully



Prodotto conforme Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)

Product complies with Directive (UE) 2017/745 (MDR)



Codice prodotto

Product code



Leggere e seguire attentamente le istruzioni per l'uso

Read instructions carefully



Fabbricante

Manufacturer



DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1

MEDICAL DEVICE CLASS 1